



**D**er 2100 Classic bietet eine unübertroffen kosteneffektive Lösung für die meistverwendete Sterilisationsmethode der Welt.

Durch sein elegantes, ästhetisch ansprechendes Design und sein breites Spektrum fortschrittlicher Funktionen ist der 2100 „Classic“ perfekt auf das moderne Klinikumfeld und die hohen Ansprüche in der Medizin abgestimmt.



- Leicht, kompakt und transportabel.
- Der Automatikzyklus wird einfach durch einen Handgriff gestartet.
- Leuchten zeigen den Gerätestatus an: „Stromzufuhr eingeschaltet“ - „Zyklus läuft“ - „Sterilisation läuft“ - „Zyklus erfolgreich abgeschlossen“ oder „Zyklus fehlgeschlagen“.
- Ein Verriegelungssystem verhindert ein Abnehmen des Deckels, während der Behälter mit Druck beaufschlagt ist.
- Ein zweistufiges „Überdruck“-Schutzsystem aus kalibriertem Überdruckventil und Dichtungsvorrichtung sorgt für doppelten Schutz.
- Elektronische Sensoren unterbinden automatisch die Stromzufuhr, wenn zu wenig Wasser vorhanden ist.
- Optionale Temperatur- und Druckmesser zeigen die Betriebsbedingungen in der Kammer während des Sterilisationszyklus an.



**2100**  
Classic

**Klinische Autoklaven**




## Zubehör:



- Instrumententablett (219293)
- Instrumentenkorb Standardmodell (219292)  
Großes Modell (219296)



- Instrumentenkassette (219291).
- Kassettenstuhl (219290).

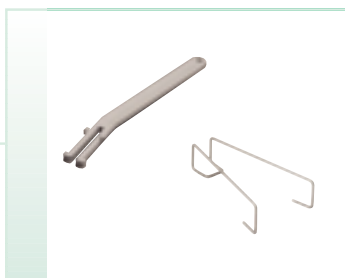

- Heber für Instrumententablets und Kassettenstühle (219294).
- Korbklammer (219295).

## Modelloptionen:

Durch sein breites Modell- und Zubehörsortiment bleibt der 2100 Classic weltweit das Gerät der Wahl für jeden medizinischen Sterilisationsbedarf.

- Zubehöroptionen für:  
Allgemeinmedizin, Zahnmedizin, Fußpflege, Kosmetik-, Tätowier- und Body-Piercing-Studios, Tiermedizin und Labor.
- Kammeroptionen:  
Standardmodell - 9 Liter  
Großes Modell - 12 Liter  
Extragroßes Modell - 16 Liter
- Sterilisationsoptionen:  
126°C - 11 Minuten oder  
121°C - 16 Minuten.



- Dichtung (219500).
- TST-Indikatorstreifen  
121°C/15 Min. (219276).  
126°C/10 Min. (219277).

## Technische Daten:

Höhe -	Standard	335 mm
	Groß	420 mm
	Extragroß	582 mm
Kapazität -	Standard	9 Liter
	Groß	12 Liter
	Extragroß	16 Liter
Breite (alle Modelle)		340 mm
Gewicht (alle Modelle)		4,5 kg
Kammer -	Standard	21/23 cm
	Groß	21/33 cm
	Extra groß	21/48 cm
Max. Instrumentenlänge/Beladung -		
	Standard	228 mm / 3 kg
	Groß	290 mm / 4 kg
	Extra groß	460 mm / 4 kg
Sterilisationstemperatur/-dauer	-121 °C / 16 Min.	126 °C / 11 Min.
Zyklusdauer (nom.)	121 °C - 22 Min.	126 °C - 26 Min.
Betriebsdruck		1,4 Bar
Spannung/Leistungsaufnahme		230 V /1500 W
Frequenz		50 Hz



ISO 9001  
No. FM 31988



0086



### Die Autorität in Sachen Sterilisation

Prestige Medical Limited P.O.Box 154, Clarendon Road,  
Blackburn, Lancs, BB1 9UG. England.  
Tel: +44 (0)1254 682622 Fax: +44 (0)1254 682606  
email: zenith@prestigemedical.co.uk

Registered in England No. 2826793 VAT No. GB 633707835

Registered Office: Neville House, 42-46 Hagley Road,  
Edgbaston, Birmingham B16 8PZ England

Prestige Medical and Zenith are registered trademarks.

