



L'autoclave 2100 Classic è la soluzione più efficace in termini di costo per il metodo di sterilizzazione più diffuso in ambito clinico oggi.

L'elegante estetica, insieme a una miriade di funzioni potenziate, fa del modello 2100 'Classic' il complemento perfetto nelle moderne cliniche e per le rigorose esigenze dei professionisti sanitari.



- Leggera, compatta e portatile.
- Avvio del ciclo mediante una semplice operazione monostadio.
- Le spie indicatrici in sequenza mostrano i messaggi 'Power to Unit' (Unità accesa) - 'Cycle in Progress' (Ciclo in corso) - 'Sterilization in Progress' (Sterilizzazione in corso) - 'Cycle is Successful' (Ciclo riuscito) oppure 'Cycle has Failed' (Ciclo non riuscito).
- Un sistema di asservimento previene l'apertura del coperchio in presenza di pressione residua nel recipiente.
- Un sistema a due stadi protegge dalla sovrappressione e include una valvola calibrata di scarico della pressione e un dispositivo per lo scarico di sicurezza tramite guarnizione.
- Rilevatori elettronici spengono la corrente in presenza di acqua insufficiente.
- I termostati e i manometri facoltativi indicano le condizioni all'interno della camera di sterilizzazione durante il ciclo.




2100
Classic

Autoclavi cliniche




Accessori:

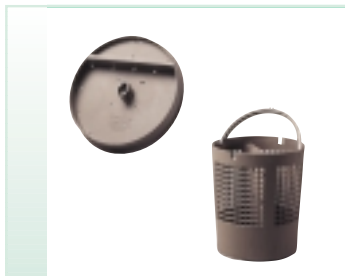

- Vassoio per strumenti (219293)
- Cestello per strumenti - Standard (219292) - Maggiorato (219296)



- Cassette per strumenti (219291).
- Rastrelliera per strumenti (219290).

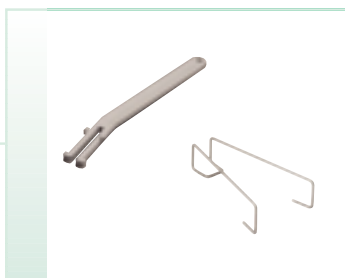

- Dispositivo di sollevamento per vassoio e rastrelliera (219294).
- Sostegno per il cestello (219295).

Gamma di modelli:

Grazie all'ampia gamma di modelli e alle varie opzioni per componenti interni, la 2100 Classic è tuttora l'autoclave preferita da tutti i professionisti sanitari nel mondo, a prescindere dalla natura dei requisiti specifici.

- Opzioni per i componenti interni dell'autoclave:
Sterilizzazione di strumenti medici generali, dentistici, per chiropodia, tatuaggi, body piercing, veterinaria e applicazioni di laboratorio.
- Opzioni per la camera di sterilizzazione:
Standard - 9 litro
Maggiorato - 12 litro
Super-maggiorato - 16 litri
- Opzioni per la sterilizzazione:
126°C per 11 minuti oppure
121°C per 16 minuti.



- Guarnizione (219500).
- Strisce indicatrici TST
121°C/15 min (219276).
126°C/10 min (219277).

Specifiche:

Altezza - Standard 335mm
Maggiorato 420mm
Super-maggiorato 582mm

Capacità - Standard 9 l
Maggiorato 12 l
Super-maggiorato 16 l

Larghezza (tutti i modelli) - 340 mm

Peso (tutti i modelli) - 4,5 kg

Camera - Standard 21/23 cm
Maggiorata 21/33 cm
Super-maggiorata 21/48 cm

Max. lunghezza/peso strumenti -
Standard 228 mm / 3 kg
Maggiorata 290 mm / 4kg
Super-maggiorata 460 mm / 4 kg

Temp/Tempo di sterilizzazione - 121°C / 16 min
126°C / 11 min

Durata del ciclo (nominale) 121°C - 22 min
126°C - 26 min

Pressione di esercizio 1,4 bar

Tensione/Wattaggio 230v /1500w

Frequenza 50Hz



ISO 9001
No. FM 31988



0086



Investiamo nella sterilizzazione - nel mondo intero
L'eccellenza nella qualità, sicurezza e servizio

Prestige Medical Limited P.O.Box 154, Clarendon Road,
Blackburn, Lancs, BB1 9UG. Inghilterra..
Tel: +44 (0)1254 682622 Fax: +44 (0)1254 682606
email: sales@prestigemical.co.uk

Società registrata in Inghilterra con n° 2826793 Partita IVA 633707835
Sede legale: Neville House, 42-46 Hagley Road,
Edgbaston, Birmingham B16 8PZ England
Prestige Medical and Zenith are registered trademarks.